

## MANUAL DE INSTRUÇÕES


Para sua segurança leia este manual antes de usar o equipamento.

### GARANTIA

Período: 1 ano

\*A garantia não cobre danos causados por acidente, uso inadequado e reposição de peças desgastadas pelo uso como: rolamentos, carvão e pinça.

### ESPECIFICAÇÕES

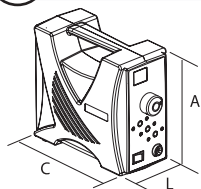


CAIXA DE CONTROLE				
FONTE DE ENTRADA	FUSÍVEL	PESO	MEDIDAS (mm)	CARGA MÁX.
AC100~120V 50/60hz	5A	2,5kg	(L) 96	ww
AC220~240V 50/60hz	2A		(C) 207 (A) 182	



PEÇA DE MÃO					
ROTAÇÃO	50.000RPM				
SAÍDA	230 W				
TORQUE MÁX.	7,8 N cm				
PESO	254 g				
MEDIDAS(mm)	L	L1	L2	D	D1
	171	78	93	28	18

### COMPONENTES

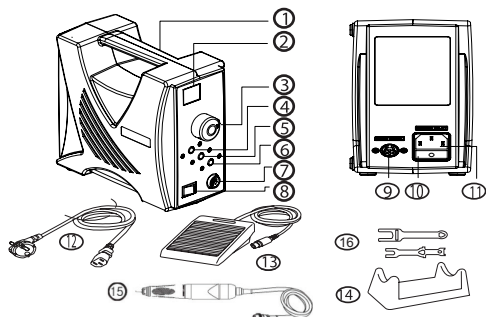

- 1-Caixa de controle
- 2-Display da rotação/RPM
- 3-Controle de velocidade
- 4-Botão Liga/Desliga Motor
- 5-Seletor Hand/Foot (Manual/ Pedal)
- 6-Seletor de direção: FWD/REV (sentido horário/anti-horário)
- 7-Conector cabo da peça de mão
- 8-Botão On/Off Caixa de Controle
- 9-Conector cabo do pedal
- 10-Caixa do fusível
- 11-Entrada da eletricidade
- 12-Cabo da eletricidade
- 13-Pedal com controle de velocidade
- 14-Suporte da peça de mão
- 15-Peça de mão com cabo
- 16-Chaves

\* Ao abrir a caixa verifique se o motor está completo.



### ATENÇÃO

- Não selecione mais de uma função ao mesmo tempo.
- Após o termino da vida útil de seu equipamento não o descarte em locais indevidos como lixões e terrenos abandonados evitando assim prejuízos ao meio ambiente, existem vários postos de reciclagem espalhados pelo país que buscam este tipo de material.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	TEMPERATURA	10~35
	UMIDADE	10~80
	PRESSAO ATMOSFÉRICA	700~1060
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE/ ESTOQUE	TEMPERATURA ( °C)	20~60
	UMIDADE	5 ~9
	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	700~1060



### MODO DE OPERAÇÃO

- 1-Mantenha a caixa de controle desligada ao conectar os cabos da peça de mão, pedal e eletricidade.
- 2-Posicione o controle de velocidade na posição '0'
- 3-Verifique se a broca está travada na pinça.
- 4-Segure a peça de mão com uma das mãos e com a outra ligue a caixa de controle.



#### Power ON (I)

Uma luz verde acenderá indicando que a caixa de controle está ligada, números irão aparecer no display de velocidade( RPM)



#### Power OFF (O)

A luz verde e os números no display de velocidade irão se apagar ao desligar a caixa de controle.



- 5-Seleciona a opção de controle de velocidade desejada: Hand /Foot( Manual /Pedal)



- 6-Seleciona o sentido da rotação desejado: FWD/ REV (Horário; Anti-horário)



- 7-Pressione o botão MOTOR:

- Antes e depois de alterar o sentido de rotação (FWD/REV)
- Antes e depois de alterar a forma de controle de velocidade, de pedal para manual e vice e versa.
- Sempre que desejar "parar" ou "recomeçar" a rotação do motor.



- 8-Em caso de sobrecarga o display da caixa de controle irá indicar 00, após 5 segundos a caixa irá "parar", indicar "ERROR 3" e o som "beep" será ouvido. Para que o motor volte a funcionar aperte o botão Manual ou caso esteja controlando a velocidade pelo pedal, retire o pé do mesmo.

### 40 50 Alterando a rotação de 40.000 RPM para 50.000 RPM

Ao alcançar a rotação de 40.000RPM aperte a trava localizada no controle de velocidade e gire até o final atingindo a rotação de 50.000RPM. Para diminuir a rotação basta retornar o controle de velocidade a posição anterior, sem a necessidade de apertar a trava novamente. Este sistema foi desenvolvido para garantir a segurança do operador do equipamento e também para evitar que brocas sejam danificadas.



### MANUTENÇÃO

- Limpe a peça de mão com um pano macio e umedecido com álcool, não molhe a parte interna.
- Não aplique óleo ou graxa nos rolamentos da peça de mão.
- Jatos de ar podem prejudicar a vida útil da peça de mão.



### ATENÇÃO


- Desligue ou posicione o controle de velocidade em "0" para inserir e retirar brocas da pinça.
- Caso o equipamento apresente algum problema, antes de encaminhar para Assistência Técnica verifique:

PROBLEMA	VERIFICAR	CAUSA	SOLUÇÃO
Motor não funciona	A luz da caixa não acende quando o motor está ligado.	A caixa de controle deve estar com algum problema.	Verifique o fusível e o botão On/Off da caixa de controle.
	A peça de mão não funciona mesmo com a luz do seletor manual/pedal acesa.	Verifique a conexão do cabo de eletricidade.	Conecte o cabo de fôrma correta.
		Verifique se a pinça está aberta ( Error E1)	Trave a pinça.
	A peça de mão não funciona mesmo com a luz do motor acesa.	Verifique a conexão entre a caixa de controle e a peça de mão.	Conecte a peça de mão adequadamente.
		Verifique se algum cabo está quebrado.	Providencie um novo.
	A rotação não aumenta.	A caixa de controle deve estar com problema.	Providencie um novo.



## CUIDADO

- 1-A caixa de controle possui uma memória que salva a último sentido da rotação e a forma de controle utilizada, portanto cuidado ao ligar.
- 2-Não utilize o equipamento em locais úmidos.
- 3-Somente utilize a peça de mão e o pedal com a caixa de controle do conjunto.
- 4-Não ligue o motor com a trava da pinça aberta (1 Error).
- 5-Para evitar acidentes siga a tabela abaixo variando a rotação de acordo com o diâmetro da broca:

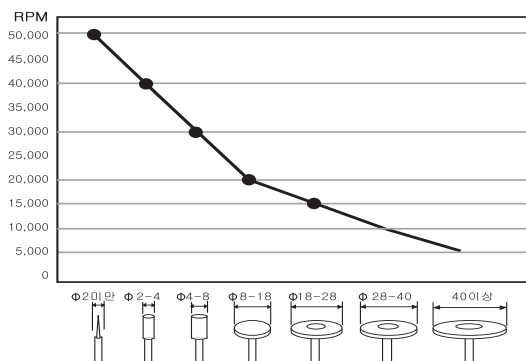

A rotação pode variar de acordo com o modelo ou material da broca.



## ATENÇÃO

- Caso não seja um técnico habilitado não desmonte a peça de mão.
- Ao desconectar o cabo da eletricidade não toque nele com as mãos molhadas, evitando assim choques elétricos.
- Não curve muito e nem coloque peso sobre o cabo de eletricidade.
- Evite usar o equipamento próximo de fontes de calor como cigarros e velas acesas ou produtos inflamáveis.
- Este é um equipamento de uso profissional, mantenha fora do alcance de crianças.

### 6-Medidas indicadas de Brocas:

- Diâmetro da haste: 2,35 mm.
  - Comprimento mínimo: 10 mm.
  - Quando a trava da pinça estiver fechada o comprimento de projeção da broca deve ser aproximado de: 35 mm.
- Use brocas padronizadas.

- 7 -Evite deixar a peça de mão cair, caso ocorra, verifique se a broca continua reta e se a caneta está aquecendo.
- 8 -Verifique se o motor está desligado antes de encaixar o cabo na eletricidade.
- 9-Se algum problema ocorrer com a peça de mão somente volte a usá-la após os reparos necessários.
- 10-Verifique a voltagem.
- 11-O equipamento possui circuito de proteção contra sobrecarga.
- 12-Somente use acessórios indicados para o equipamento.
- 13-Recomenda-se o uso de óculos de proteção.

## • TROCA DO FUSÍVEL

O fusível fica localizado em uma pequena caixa na parte de trás da caixa de controle, retire-o e substitua por um novo.

## • CÓDIGOS DE ERRO

Em casos de sobrecarga, queda de energia, rotor queimado, o display da caixa de controle mostrará um código de erro, verifique a tabela abaixo para identificá-los:

	Liberar	Ação
E1	Aperte o botão Motor ou pise no pedal	-Verifique se o cabo da eletricidade está conectado. -Verifique se a trava da pinça está travada, ligue novamente. -Reinicie a caixa de controle após desligá-la por 10 segundos.
E3		-Encaminhe para Assistência Técnica.
E0		- Desconecte e conecte novamente a peça de mão.

Código Erro	Causa
E1	Peça de mão mal conectada, problemas no rolamento ou sobrecarga de uso.
E2	Problema na caixa de controle.
E0	Problema na conexão da peça de mão.

## BORDENTE COM. IMP. E EXP .LTDA

R.POMPEO LEONI,52-VILA DAS MERCÊS

SÃO PAULO - SP CEP 04174-050

CNPJ: 01.236.224/0001-60

Fone (11) 2940-4042

vendas@bordente.com.br

www.bordente.com.br